




MR-veilig

ADDUCTED ARM SCOOP

Voor eenvoudige en duurzame ergonomische armadductie

MR-veilig ADDUCTED ARM SCOOP

Voor eenvoudige en duurzame ergonomische armadductie.

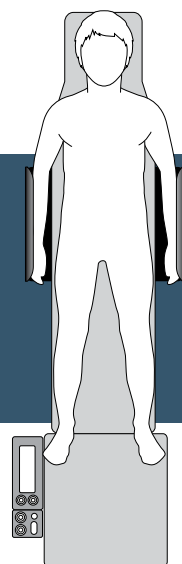

De optimale oplossing om de armen van een liggende patiënt tijdens beeldgeleide procedures in bedwang te houden en de patiënt veiligheid en comfort te bieden.

De Adept Medical Adducted Arm Scoop is een duurzame, speciaal ontworpen oplossing die de armen van de patiënt comfortabel ondersteunt in de geadduceerde positie tijdens beeldgeleide procedures op de vaak smalle beeldvormingstafels.



Patiëntpositionering

Het is ontworpen met gebogen ergonomische randen voor gebruiksgemak en om de kans op drukletsel te verminderen. Hierdoor kan de patiënt zijn armen comfortabel en veilig in de anatomisch geadduceerde positie laten rusten.



De centrale gleuf creëert een houvast voor de clinicus om het hulpmiddel gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Er zijn extra gleuven toegevoegd om de armen van de patiënt verder vast te zetten met riemen of iets dergelijks.



De Adducted Arm Scoop is ontworpen voor gebruik met bestaande laboratorium- en beeldvormingsapparatuur en kan worden gebruikt met elk CT, MRI of C-arm beeldvormingscentrum.


Plaatsing en verstelling

De basisplaat van de Adducted Arm Scoop is snel en eenvoudig op te zetten en wordt eenvoudig verankerd tussen de beeldvormingstafel en het matras, waarbij het gewicht van de patiënt wordt gebruikt om de plaat tijdens de procedure op zijn plaats te houden.

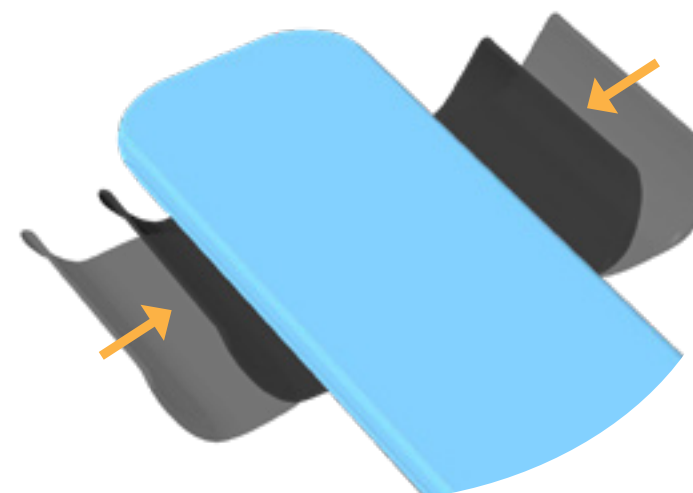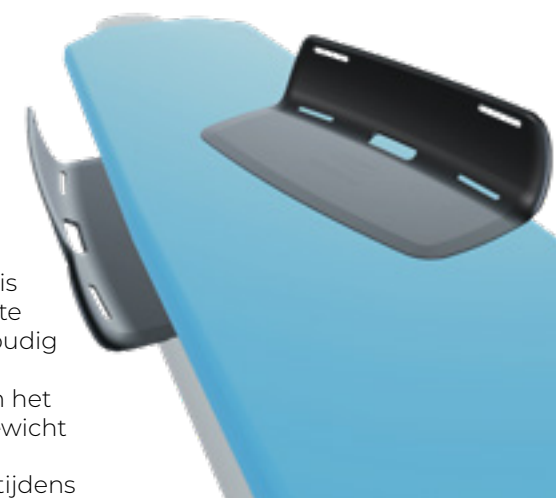

De lengte van de armsteun is ontworpen om de onderarm van de patiënt te omvatten en is geschikt voor patiënten met verschillende omvang.

De steunhoogte is ontworpen om net boven de arm te komen voor gemakkelijke toegang en kabel- en snoerbeheer.

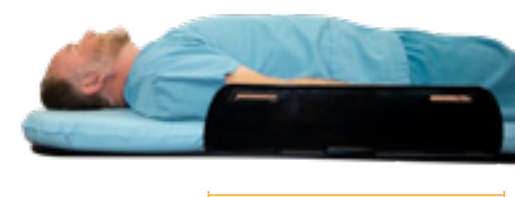

Met een hoge weerstand tegen chemische aantasting kunnen de scoops gemakkelijk worden gedesinfecteerd tussen de patiënten door. De Adducted Arm Scoop is vervaardigd uit hoogwaardige technische kunststoffen en is ongelooflijk duurzaam, stijf en geschikt voor langdurig gebruik.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | MRI-veilig
- | Zeer duurzaam
- | Ergonomisch ontwerp
- | Chemicaliënbestendig
- | Veiligheid van de patiënt
- | Past op alle tafels
- | Röntgendoorschijnend


Specificaties



0,9 kg **Productgewicht**

Toepassingen

- Diagnostische en interventionele procedures waarbij adductie van de arm van de patiënt nodig is.
- CT-beeldvorming waarbij de patiënt binnen een strak kader moet worden gepositioneerd.

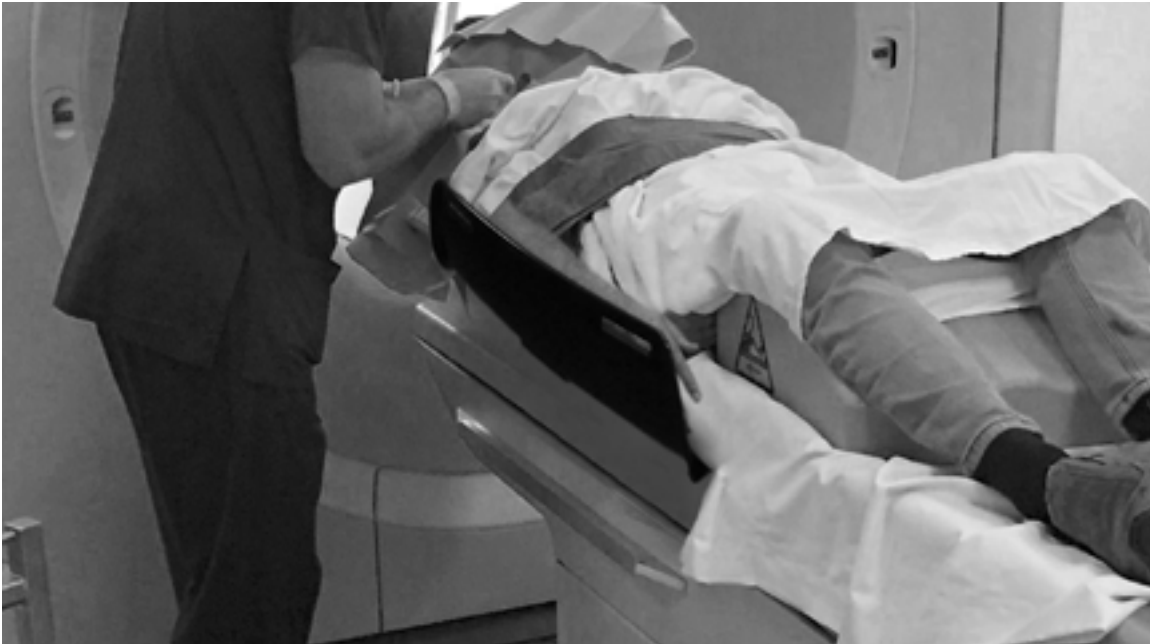

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele radiologie



Interventionele neuroradiologie



Interventionele cardiologie



Algemeen chirurgisch



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland