




DRAPE SUPPORT


Veelzijdig beheer van steriele afdekdoeken.

DRAPE SUPPORT

Veelzijdig beheer van steriele afdekdoeken.

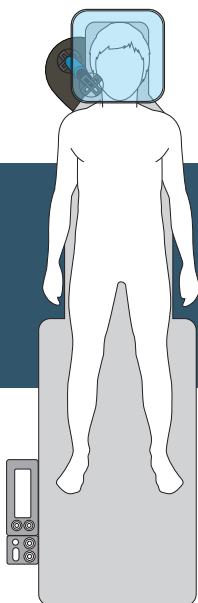

De uiterst veelzijdige Drape Support is ontworpen om een steriele afdekdoek over de patiënt te ondersteunen en biedt veel verschillende plaatsingsopties op de beeldvormingstafel.

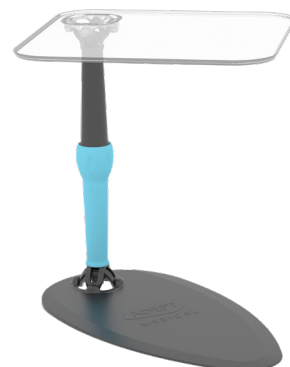

Met twee scharnierende gewrichten kan het gemakkelijk worden gemanoeuvreerd om aan de eisen van de procedure en de patiënt te voldoen.

U kunt het in een paar seconden installeren. Schuif gewoon het daggerboard onder de matras op een handige plaats. Het verstelbare oppervlak is ideaal voor het ondersteunen van lichte hulpmiddelen, zoals spuiten, nierschalen, enz. Het is transparant om de patiënt meer comfort te bieden en angst te verminderen.

Klinisch getest en kan worden gebruikt bij diverse interventieradiologie- en cardiologieprocedures, zoals anterograde toegang tot de beenslagader, toegang tot de halsslagader, percutane plaatsing van een pacemaker, inbrengen van een Port-A-Cath of als anesthesiescherm.





De DrapeSupport is volledig gemaakt van radiolucente, hoogwaardige technische kunststoffen voor een superieure stijfheid, duurzaamheid en weerstand tegen chemische stoffen. De Drape Support is licht en compact en neemt weinig plaats in rond de beeldvormingstafel, en zelfs nog minder wanneer deze wordt opgevouwen om op te bergen.



Veelzijdig en manoeuvreerbaar




Het onderste verbindingstuk geeft het vergrendelde been een groot bewegingsbereik voor allerlei procedures. Het doorzichtige steunvlak kan worden gemanipuleerd en op de gewenste stand worden vergrendeld.



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | Optimaal comfort voor de patiënt en minder angst
- | Snelle installatie en verwijdering
- | Werkoppervlak voor lichte voorwerpen
- | Uiterst veelzijdig
- | Past op alle tafels
- | Röntgendoorschijnend
- | Neemt weinig plaats in rond de tafel
- | Lichtgewicht, weinig opslagruimte nodig

Specificaties

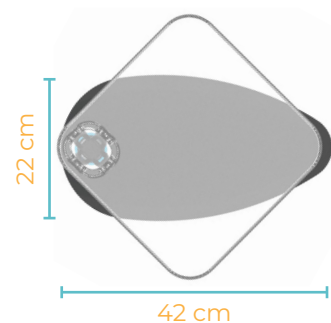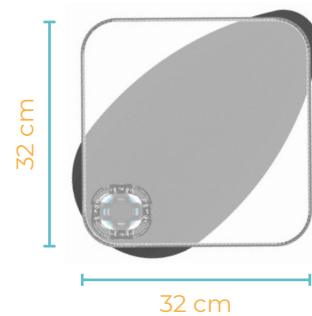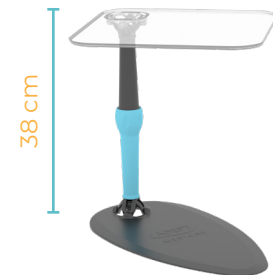

1,2 kg

Productgewicht

Toepassingen

Interventionele cardiologie

- Toegang tot de halsslagader
- Percutane plaatsing van een pacemaker

Anesthesiescherm voor algemene chirurgie

Perifere interventie - perifeer arterieel vaatlijden

Interventionele radiologie

- Anterograde femorale methode
- Plaatsing van een centrale veneuze katheter
- Plaatsing van een Port-A-Cath (PAC)

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele radiologie



Perifere interventie





Interventionele cardiologie



Algemeen chirurgisch



Interventionele neuroradiologie

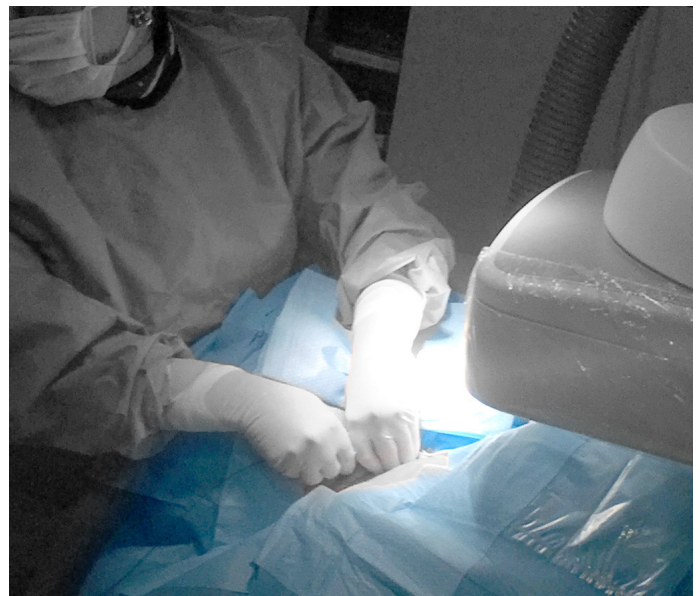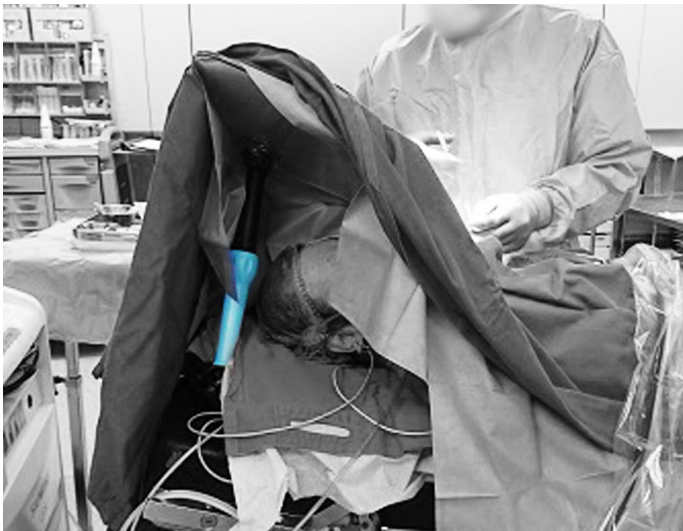

Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland